


## Návod k obsluze Masážní žíněnka

### Úvod

Firma Telemarketing International Kft. Si Vám dovoluje touto cestou poděkovat za Vaší důvěru, že jste se rozhodli pro nákup našeho výrobku. Jsme si jisti, že s našimi výrobky budete naprosto spokojeni i v budoucnu.

### Popis výrobku:

- a- Masážní žíněnka
- b- Motor
- c- Proužky ke složení
- d- Dálkový ovládač
- e- Přípojný adaptér
- f- CA/CC adaptér

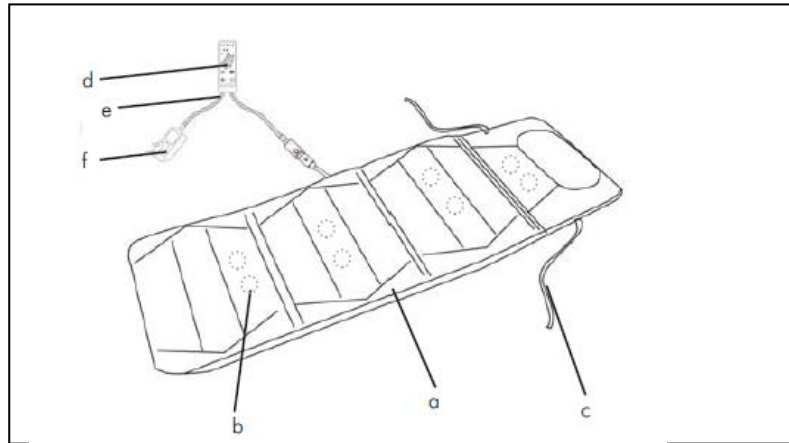

### Bezpečnostní předpisy:

- Následující předpisy a pokyny jsou velice důležité z hlediska bezpečného užívání výrobku, proto Vás dovoluujeme požádat, aby jste si je v tomto návodu pozorně přečetli a potažmo je také neprodleně dodržovali.
- Firma Telemarketing International Kft. nebere žádnou odpovědnost za zranění a škody, které vznikly z důvodu nesprávného užívání výrobku.
- Před prvním užíváním výrobek nejprve rozbalte z obalu a přesvědčte se, zda-li je v perfektním stavu.
- Tento výrobek je konstruováno výhradně pro interní použití, proto ho nepoužívejte ve volném prostoru.
- Nikdy nevystavujte výrobek vlivům počasí, jako dešti, sněhu, slunečnímu záření apod..
- Výrobek mohou využívat výhradně osoby dospělé. Děti či hendikepované osoby nikoliv.
- Pokud trpíte v nějakém zdravotním potíží, případně máte problémy se srdíčkem, trombózu či nějaké poranění, tak před užíváním masážní žíněnky nejprve konzultujte s Vaším lékařem.
- Pro terapeutické účely výrobek není vhodný.
- Než výrobek zapojíte do elektrické sítě, tak nejprve zkontrolujte, zda-li jeho přípojný kabel, vidlice je v nepoškozeném stavu. Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud jeho elektrický kabel je poškozený. V takovém případě neprodleně kontaktujte naši autorizovanou službu pro zákazníky.
- Před prvním užíváním a zapojením výrobku do elektrického sítě si nejprve zkontrolujte, zda-li technické parametry elektrického sítě místa plánovaného užívání výrobku jsou odpovídající parametrům uvedených na výrobním štítku výrobku.
- Výrobek nedávejte do vody, nebo případně do jiné kapaliny.
- Vyhýbejte se přehřátí výrobku! Pokud výrobek již nehodláte dále používat, nebo případně ho hodláte očistit, tak zařízení nejprve odpojte z elektrického sítě.
- Pokud to pocítujete tak, že výrobek je příliš prohřáté, tak v jeho dalším užívání nepokračujte, vypněte ho.
- Nepoužívejte výrobek pokud je mokré.
- Dbejte tomu, aby do žíněnky nebyly ani omylem vpíchnuté ostré či špičaté předměty.
- Nikdy nezapínejte výrobek, pokud je ještě ve složeném stavu.
- Dbejte toho, aby výrobek nebyl používán na největším výkonu, to totiž může vést k nežádanému popálení kůže.
- Nespěte na provozovaném žíněnce.
- Pravidelně kontrolujte případné opotřebování výrobku.
- Nikdy nepoužívejte výrobek vlhkým, či mokřým tělem.

### Předpisy pro užívání výrobku:

- Před užíváním masážní žíněnky si nejprve zkontrolujte, zda-li výrobek je v bezvadném stavu.
- Před užíváním žíněnku nejprve připojte k elektrické síti.
- Následně připojte k žíněnce dálkový ovládač.
- Masážní žíněnku umístěte na takové místo, kde ji můžete pohodlně používat.
- K zapnutí výrobku stiskněte tlačítko s nápisem I/O na dálkovém ovládači. Následně se masážní žíněnka automaticky zapne a kontrolka provozu se rozsvítí.
- Pomocí dálkového ovládače si můžete vybrat z pěti masážních programů a ze třech stupňů intenzity.
- Na dálkovém ovládači stiskněte tlačítko MODE, tím si můžete vybrat žádaný masážní program (od 1 až do 5).
- Pak si zvolte potřebnou intenzitu masáže a to se stisknutím tlačítka znázorněném na obrázku.



- 1 stisknutí tlačítka: nízká intenzita
- 2 stisknutí tlačítka: střední intenzita
- 3 stisknutí tlačítka: vysoká intenzita

- Pomocí dálkového ovládače si zvolte na které části těla hodláte užívat masážní žíněnku, tzn. na krku, na zádech, na noze či na bedrech.
- Kontrolka Vám signalizuje vybrané zóny.
- Následně stiskněte tlačítko znázorněné na obrázku a tím se Vaše žíněnka rozehřeje.
- K vypnutí ohřívání je třeba též stisknout to samé tlačítko.
- K vypnutí masážní žíněnky opět stiskněte tlačítko s označením I/O.
- **POZOR!** Zařízení se úplně vypne pouze tehdy, pokud je odpojeno z elektrického sítě!



#### **Údržba a skladování výrobku:**

- Před údržbou výrobek nejprve odpojte z elektrické sítě.
- K očištění výrobku nikdy nepoužívejte drsné a silné chemické čisticí prostředky, nebo případně jiné prostředky, které by mohly poškodit výrobek.
- Od nečistot a prachu žíněnku můžete nejhodnějším způsobem zbavit pomocí suchého hadru.
- K očištění dálkového ovládače používejte suchý hadřík.
- Masážní žíněnku skladujte na čistém a suchém místě.

#### **Technické údaje:**

Nabíječ: 100-240V ~ 50/60hz 0.4A  
12V DC 1.2A 14.4W

Výrobek odpovídá nařízení č. 2006/95/EC platném pro zařízení provozovaných při nízkém napětí, resp. nařízení č. 2004/108/EC vztahující se na použití z elektromagnetického hlediska a dále platným bezpečnostním pravidlům a nařízením.

#### **Ochrana životního prostředí ve smyslu směrnice – 2002/96/EC**

- Tento výrobek je konstruováno z recyklovaných materiálů a součástek vysoké kvality.
- Pokud je na výrobku uveden piktogram přeškrtnuté popelnice, tak to znamená, že daný výrobek odpovídá evropské směrnici č. 2002/96/EK.
- Dovolujeme si Vás požádat, že se podle potřeby informujete o možnostech recyklace a zneškodnění elektrických a elektronických spotřebičů ve Vašem okolí.
- Následujte vždy místní předpisy a pokyny, nikdy nevyhazujte již nefunkční elektrické spotřebiče do domácího odpadu. Se správnou recyklací elektrického a elektronického odpadu se dá účinně předcházet zbytečnému a nežádoucímu poškození našeho životního prostředí.

	<p>Distributor:</p>  <p>MedioShopGroup MediaShop GmbH 695 01, Hadanín, P.O. Box 31, Tel.: 420 234 261 900 www.mediashop.cz.eu</p>
---	--

