

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

❶ A terméket már előre összeszerelték, csak a csavarokat csomagolták külön, hogy a csomagás kicsi maradjon.

❷ Távolítsa el a műanyag csomagolást, csavarja be a csavart a középső részre, és enyhén húzza meg.

❸ Nyissa ki a két tartólábat. Győződjön meg arról, hogy a rugós kioldók a helyükre kattannak / bepattannak.

❹ Nyomja meg a rugós kioldókat, amikor ismét össze akarja hajtani a pedálos tréneret.

❺ A pedálpántokon két sor lyuk található, így a hevedereket hozzá lehet igazítani a lábához vagy a cipőjéhez.

❻ A szerelés után az ön pedálgépének így kell kinéznie.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A Nyomja meg a MODE / RESET gombot a számláló bekapcsolásához. Az ismételt megnyomásával előhívja a TIME, CAL és RPM kijelzéseket.

Pedálgép lépésszámlálóval - 21815

B A SCAN opcióval görgetheti a TIME, CAL és RPM kijelzéseket, amelyek mindegyike néhány másodpercig megjelenik a kijelzőn.

C A számláló abbahagyja a számlálást, amint abbahagyja a pedálok használatát. Néhány perc téltlenség után kikapcsol.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Legyen óvatos összecukáskor



Legyen óvatos a pedálgép összehajtásakor, és ügyeljen arra, hogy az ujjai és lábai a hajtogató mechanizmuson vagy a kereten kívül legyenek.

Alkalmazási terület korlátozása

Ezt a pedálgépet magánhasználatra tervezték, és nem alkalmas intenzív vagy professzionális használatra.

Hő a súrlódástól

A pedálgép egyes részei, például a házban található pedáltengelyek felmelegedhetnek vagy felforrósodhatnak használat közben.

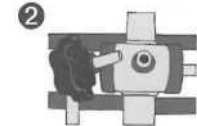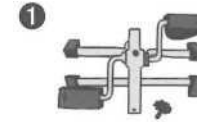

Forgalmazza:



Telemarketing International Kft.
H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36-96/961-000
Fax: +36-96/616-662
www.wsteshop.hu

