
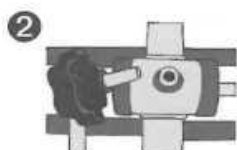


Aparat cu pedale cu pedometru

Mod de antrenament prietenos cu articulațiile

Antrenament ușor, confortabil. Întărește mușchii și articulațiile.
Dotat cu pedometru.

Perfect pentru un antrenament confortabil și ușor, deoarece vă permite să pedalați confortabil în timp ce stați pe canapea, vă uitați la televizor sau lucrați la computer. Este foarte util pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care au nevoie de terapie de reabilitare. Este ideal pentru mișcarea picioarelor, îmbunătățind astfel activitatea cardiovasculară, tonifierea mușchilor și întărirea articulațiilor. Dacă sunteți în căutarea unui antrenament confortabil/mișcare prietenoasă cu articulațiile, aparatul cu pedale este alegerea potrivită pentru dumneavoastră.

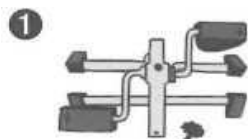

A



B



C



INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

1. Produsul a fost deja pre-asamblat, doar șuruburile au fost
2. ambalate separat pentru a menține ambalajul mic.
3. Îndepărtați folia de plastic, înșurubați șurubul în centru și strângeți-l ușor.
4. Deschideți cele două picioare de sprijin. Asigurați-vă că arcurile declanșatoare se fixează în poziție (auziți un clic când se fixează)
5. Când doriți să pliați pedala, apăsați butonul arcului declanșator.

6. Curelele pentru pedale au două rânduri de găuri, astfel încât curelele să poată fi ajustate la picioare sau pantofi.
7. Așa ar trebui să arate aparatul cu pedale după montare.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- A.** Apăsăți butonul MODE / RESET pentru a porni contorul. Apăsăți din nou pentru a afișa afișajele TIME, CAL și RPM.
- B.** Utilizați opțiunea SCAN pentru a derula afișajele TIME, CAL și RPM, fiecare dintre ele apare pe afișaj pentru câteva secunde.
- C.** Pedometrul nu mai numără imediat ce încetați să utilizați pedalele și se oprește după câteva minute de inactivitate.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Atenție când pliați

Aveți grijă atunci când pliați pedala și asigurați-vă că degetele și picioarele sunt în afara mecanismului de pliere sau a cadrului.

Limitarea scopului pentru care a fost conceput

Acest aparat cu pedale este proiectat pentru uz privat/casnic și nu este potrivit pentru utilizare intensivă sau profesională.

Căldura provenită din frecare

Unele părți ale aparatului cu pedale cum ar fi arborii pedalei din carcasă, se pot încălzi, sau pot deveni fierbinți în timpul utilizării.

CONȚINUT COLET

1 x Aparat cu pedale cu pedometru



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv