


Aparat cu pedale 21816

MINI HOME TRAINER CHROME (124014) / ALB (124015)

Aparatul cu pedale poate fi folosit în timp ce ședeți, sau stați culcat.

Verificați periodic dacă șuruburile sunt strânse corespunzător.

Când montați aparatul, vă rugăm să urmați pașii pe care îi vedeți în figurile de mai jos:

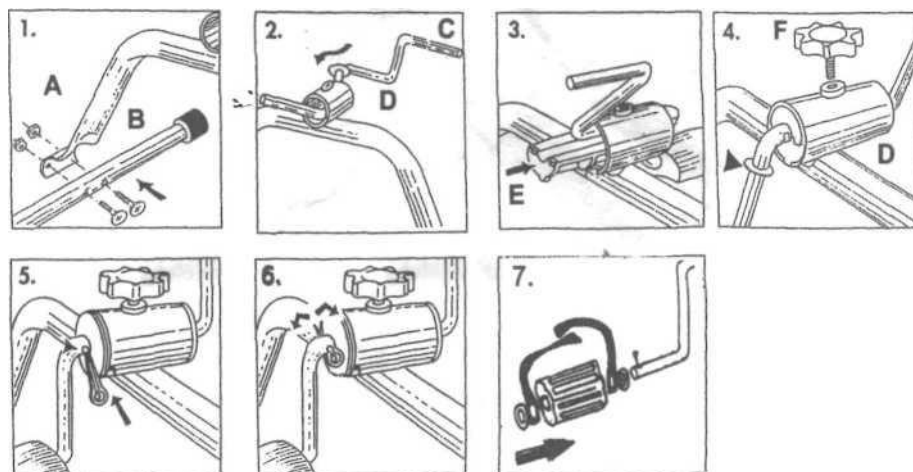

IMPORANT:

Nu utilizați aparatul cu pedale când stați pe un balansoar sau într-un scaun cu roțile la care NU s-a pus frână (sau nu este dotat cu frână). Asigurați-vă că aparatul este așezat, în siguranță (stă fix) pentru a evita riscul de alunecare. Utilizarea prelungită poate provoca supraîncălzirea unor părți ale pedalelor. Lăsați aparatul să se răcească din când în când.

Figura A



Notă: Pentru a evita rănirea, este recomandat să folosiți protecția inclusă pentru asamblarea știfturilor metalice. Această protecție nu este necesară pentru funcționarea produsului, dar

asigură o protecție fiabilă împotriva deteriorării în timpul asamblării și/sau utilizării. Protecția trebuie așezată peste știfturile metalice și apoi împinsă în exterior, așa cum se arată în Figura A.

Vizionați
videoclipul
nostru!



MediaShop GmbH
RO: 32948394
OP 2 Oradea, CP 2
Jud Bihor, Cod poștal 410670
Telefon 318.114.000
informatii@mediashop.tv