


SALTEA PENTRU MASAJ INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE



Vă mulțumim pentru încrederea acordată prin achiziționarea noului nostru produs. Suntem siguri că și pe viitor veți fi mulțumit cu produsele noastre.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- a. Saltea pentru masaj
- b. Motor
- c. Bandă pentru păstrare produs
- d. Telecomandă
- e. Conector pentru adaptor

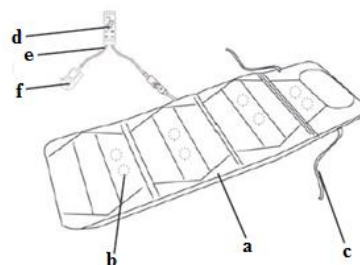

f. Adaptor CA/CC

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ❖ Următoarele instrucțiuni sunt foarte importante! Vă rugăm să le citiți cu atenție și să le urmați întocmai!
- ❖ Mediashop nu-și asumă răspunderea pentru eventualele pagube și accidente care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- ❖ Înainte de prima folosire, după ce ați despachetat produsul, asigurați-vă că este în stare perfectă.
- ❖ Acest produs este conceput numai pentru uz casnic! Nu folosiți salteaua în aer liber!
- ❖ Nu expuneți produsul la intemperii (soare, ploaie, zăpadă, îngheț, etc).
- ❖ Se utilizează numai de către adulți! Copiii și persoanele cu orice fel de handicap, nu au voie să folosească produsul!
- ❖ **Dacă sunteți cardiac, aveți tromboză, leziuni corporale, sau alte probleme de sănătate, înainte de a folosi produsul, vă rugăm să consultați medicul!**
- ❖ Nu este pentru uz terapeutic!
- ❖ Înainte de a conecta salteaua la priza electrică, verificați ca ștecherul și cablul electric să nu fie defecte sau deteriorate. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul și/sau cablul electric sunt deteriorate/defecte. Luați legătura cu distribuitorul, Serviciul Relații cu Clienții, la nr. tel: 318.114.000.
- ❖ Înainte de prima folosire, verificați dacă tensiunea scrisă pe aparat coincide cu tensiunea din rețeaua dumneavoastră electrică!
- ❖ Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide!
- ❖ Evitați supraîncălzirea aparatului! Întotdeauna deconectați salteaua de la rețeaua electrică când nu o mai folosiți sau când o curățați!
- ❖ Dacă simțiți că salteaua s-a încălzit prea tare, întrerupeți folosirea acesteia.
- ❖ Nu folosiți salteaua dacă aceasta este udă/umedă.
- ❖ Nu înfigeți/introduceți ace în saltea!
- ❖ Nu porniți alimentarea când salteaua este pliată.
- ❖ Evitați să folosiți timp îndelungat masajul la intensitate maximă, deoarece poate produce arsuri pe piele.
- ❖ **NICIODATĂ** să nu dormiți pe saltea în timp ce aceasta este în funcțiune!
- ❖ Verificați periodic, în mod regulat, ca salteaua să nu fie uzată sau deteriorată.
- ❖ Nu utilizați produsul dacă aveți corpul ud sau umed!

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- ❖ Înainte de folosire, asigurați-vă că produsul este în stare perfectă.
- ❖ Înainte de folosire, conectați aparatul la rețeaua electrică.
- ❖ Apoi cuplați telecomanda la saltea
- ❖ Așezați salteaua într-un loc/pe o suprafață plană, rigidă, unde o puteți folosi în mod confortabil.
- ❖ Pentru **PORNIRE**, apăsați butonul I/O de pe telecomandă. Salteaua cuplează automat, lampa de control începe să lumineze.
- ❖ Cu ajutorul telecomenzii, puteți alege unul din cele 5 programe de masaj și una din cele 3 trepte de intensitate.
- ❖ Pentru a alege unul din programe (de la 1 la 5), apăsați butonul **MODE** de pe telecomandă.



- ❖ Alegeți apoi treapta de intensitate, apăsând după cum urmează butonul indicat mai jos:
 - O apăsare pe buton: intensitate scăzută
 - Două apăsări pe buton: intensitate medie
 - Trei apăsări pe buton: intensitate mare

- ❖ Cu ajutorul telecomenzii selectați pe ce zonă a corpului doriți masajul (gât, mijloc, spate, picioare).
- ❖ Indicatorul luminos vă arată zonele selectate.
- ❖ Apoi, pentru încălzirea salteii, apăsați butonul indicat aici:



- ❖ Pentru a decupla încălzirea salteii, apăsați același buton care este indicat aici.
- ❖ Pentru a **OPRI** funcționarea salteii, apăsați din nou butonul I/O.

ATENȚIE! Aparatul se oprește complet, numai când îl deconectați și de la rețeaua electrică!

CURĂȚARE ȘI PĂSTRARE

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică când nu-l mai folosiți sau când îl curățați!
- Când curățați produsul, nu folosiți substanțe chimice, sau substanțe care pot deteriora salteaua.
- Salteaua se curăță de murdărie și praf cu un prosop uscat.
- Telecomanda se curăță cu o lavetă uscată.
- Se păstrează într-un loc uscat și curat.

DATE TEHNICE

Încărcător: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A

12V DC, 1,2 A, 14,4 W

Acest produs corespunde normelor europene 2006/95/CE pentru aparate de joasă tensiune, și, 2004/108/CE în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică și a cerințelor referitoare la siguranță.

LEGEA PROTECȚIEI MEDIULUI – 2002/96/EC

- ❖ Acest aparat este fabricat din materiale de o așa calitate, care se pot recicla și refolosi.
- ❖ Dacă pe produs vedeți semnul **X**, lângă un produs, înseamnă că produsul corespunde normelor europene 2002/96/EC.
- ❖ Vă rugăm să vă interesați de locurile de colectare locale pentru reciclarea și refolosirea, produselor electrice și electronice.
- ❖ Procedați conform normelor locale în vigoare pentru deșeurile electrice și electronice. Nu tratați produsul ca deșeu menajer. Reciclarea aparatului, ajută la protejarea mediului înconjurător și sănătatea oamenilor.



DISTRIBUTOR: Mediashop Holding GmbH. O.P. nr 2 Oradea. C.P. nr 2. Jud: Bihor. Cod poștal: 410670. Tel: 318.114.000.